

Suport pentru tendon patelar

Cod: SRT 307

Indicații

Se utilizează pentru reducerea disconfortului și inflamațiilor, prin compresie la nivelul tendonului rotulian.

Descriere

Este realizată din material textil și conține o pelotă care exercită compresie pe tendonul rotulian.

Închiderea se face posterior cu scai.

Lățime: 6 cm.

Compoziție

Spumă poliuretanică (burete) acoperită pe ambele părți cu material textil: interior - bumbac 100%, exterior - poliamidă 100%.

Spumă de polietilenă (pelota).

Proprietățile materialului

Ansamblul cașerat se comportă ca un regulator de umiditate: transferă transpirația corpului prin absorbția acesteia de către țesătura de bumbac, către spuma PU și exterior.

Componentele ansamblului cașerat

- **Asterix** - firul de poliamidă din compoziție are o rezistență mare la agenți chimici și biologici, rezistă la abraziune și nu absoarbe apa.
- **Moltopren (MTP)** - spumă poliuretanică cu celule deschise, permeabilă la aer (fluxul de aer în ambele sensuri este invers proporțional cu densitatea spumei) și foarte mare absorbant de umiditate.
- **Jersey cotone SOFT** - țesătură de bumbac 100% sau bumbac cu spandex - elastan (pentru creșterea elasticității).

SOFT

Codificarea tratamentului balsamic al țesăturii din bumbac pentru a-i asigura molicieune la atingere și pentru a evita iritarea pielii.




Detalii produs



- poziționarea pe tendonul patelar

Mărimi disponibile

Mărimi	Circumferința genunchiului (cm)
1	33-37
2	37-41
3	41-45

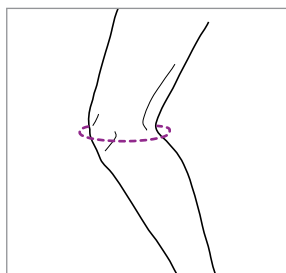

- se măsoară circumferința genunchiului la nivelul tendonului patelar