

## Orteză de încheietura mâinii mână fixă, TRIACARP JUNIOR

Cod: SRT 222

### Indicații

Se utilizează în entorse, luxații, artroze, sindrom de tunel carpian, paralizia nervului radial, fracturi la nivelul zonei, atât ca tratament ortopedic cât și postoperator.

### Descriere

Orteză realizată din material textil, prevăzută cu:

- o atelă metalică palmară ce se poate modela
- o bandă de fixare în jurul articulației radiocarpiane.

Închiderea se face cu scai, pe partea dorsală a mâinii.

Lungimea variază între 18-22 cm, în funcție de mărimea ortezei.

Orteza stabilizează și imobilizează articulația radiocarpiană.

### Compoziție

Spumă poliuretanică (burete) acoperită pe ambele părți cu material textil: interior - bumbac 100%, exterior - poliamidă 100%.

### Proprietățile materialului

Ansamblul cașerat se comportă ca un regulator de umiditate: transferă transpirația corpului prin absorbția acesteia de către țesătura de bumbac, către spuma PU și exterior.

### Componentele ansamblului cașerat

- **Asterix** - firul de poliamidă din compoziție are o rezistență mare la agenți chimici și biologici, rezistă la abraziune și nu absoarbe apa.
- **Moltopren (MTP)** - spumă poliuretanică cu celule deschise, permeabilă la aer (fluxul de aer în ambele sensuri este invers proporțional cu densitatea spumei) și foarte mare absorbant de umiditate.
- **Jersey cotone SOFT** - țesătură de bumbac 100% sau bumbac cu spandex - elastan (pentru creșterea elasticității).

### SOFT

Codificarea tratamentului balsamic al țesăturii din bumbac pentru a-i asigura moliciune la atingere și pentru a evita iritarea pielii.




### Detalii produs



- bandă de fixare în jurul articulației radiocarpiane
- atelă metalică palmară ce se poate modela

### Mărimi disponibile în variantele stânga și dreapta

Mărimi	Circumferința încheieturii mâinii (cm)	Lungime orteză (cm)
1	10-12	18
2	12-14	20
3	14-16	22

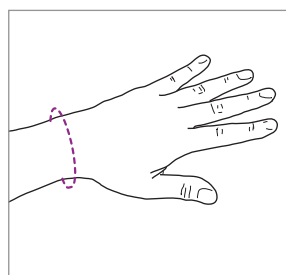

- se măsoară circumferința încheieturii mâinii