

Orteză de cot simplă fără atelă, JUNIOR

Cod: SRT 223

Indicații

Se utilizează în entorse, luxații, contuzii.

Descriere

Orteză realizată din material textil.

Închiderea se face cu scai.

Orteza este un suport pentru articulația cotului, pe care o stabilizează și o protejează.

Compoziție

Spumă poliuretanică (burete) acoperită pe ambele părți cu material textil: interior - bumbac 100%, exterior - poliamidă 100%.

Proprietățile materialului

Ansamblul cașerat se comportă ca un regulator de umiditate: transferă transpirația corpului prin absorbția acesteia de către țesătura de bumbac, către spuma PU și exterior.

Componentele ansamblului cașerat

- **Asterix** - firul de poliamidă din compoziție are o rezistență mare la agenți chimici și biologici, rezistă la abraziune și nu absoarbe apa.
- **Moltopren (MTP)** - spumă poliuretanică cu celule deschise, permeabilă la aer (fluxul de aer în ambele sensuri este invers proporțional cu densitatea spumei) și foarte mare absorbant de umiditate.
- **Jersey cotone SOFT** - țesătură de bumbac 100% sau bumbac cu spandex - elastan (pentru creșterea elasticității).

SOFT

Codificarea tratamentului balsamic al țesăturii din bumbac pentru a-i asigura moliciune la atingere și pentru a evita iritarea pielii.




Detalii produs



- zonă de confort pentru plica cotului

Mărimi disponibile

Mărimi	Circumferința cotului (cm)	Lungime orteză (cm)
1	16-18	20
2	18-20	22
3	20-22	24

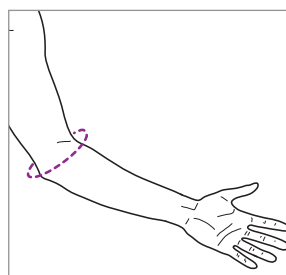

- se măsoară circumferința cotului